

BH

P-CEM Automix®

Uputstvo za upotrebu

P-Cem Automix je privremeni cement koji ne sadrži eugenol i koji ne sprečava stvrdnjavanje materijala za ispunu i učvršćivanje na bazi plastičnih materijala. P-Cem Automix je indiciran kod alergija na eugenol.

Područja primjene

P-Cem Automix upotrebljava se kao provizorni cement za krunice i mostove, kao i za zatvaranje.

Bitne komponente

Smolne kiseline i metalni oksidi.

Interakcije

Nisu poznate.

Upozorenja

Izbjegavajte kontakt zamiješanog cementa s kožom ili sluznicom. Ako ipak dođe do kontakta, uklonite materijal vatom natopljenom alkoholom i isperite s dosta vode. U slučaju kontakta s očima, oči širom otvorenih kapaka isperite s dosta vode i konzultirajte oftalmologa.

Napomene

Proizvod držite podalje od djece. Proizvod je predviđen samo za stomatološku upotrebu.

Primjena

(priprema kartuše)

Kod prve primjene, P-Cem Automix dvostrukom kartušu umetnite u pripadajuću pištolj za kartuše. Uklonite zatvarač Automix dvostrukom kartuše i istisnite malo paste tako da obje nitii počnu ravnomjerno izlaziti. Istisnutu pastu odstranite i postavite Automix kanilu. Prije nanošenja u provizornu krunicu ili šupljinu, istisnite pastu otprilike veličine lješnjaka i tu količinu odbacite.

Zatim istisnite još cementa i nanosite ga (tek je sada zagarantovan homogeni odnos miješanja P-Cem Automix cementa).

Korištenu kanilu zamijenite novom tek pri sljedećoj primjeni jer ćete na taj način spriječiti stvrdnjavanje cementa u kartuši.

Vrijeme obrade: oko 1,30 min.


Vrijeme stvrdnjavanja u ustima: 2 - 3 min.



We know how

CE 0482

Made in Germany

 **Willmann & Pein GmbH**

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de

MD

i

☂

☀

0°C

22°C

!

Achtung
Warning

Gefahr
Danger

Achtung
Warning

H315

H318

H410

2020-REV-004

RU

P-CEM Automix®

Инструкция по применению препарата

P-Cem automix является не содержащим эвгенол временным цементом, который не влияет на отверждение/установку фиксирующих и пломбировочных материалов на основе смол. Применение P-Cem automix допускается при аллергии на эвгенол.

Показания к применению

P-Cem automix применяется в качестве цемента для временной фиксации коронок, мостов и для временного пломбирования.

Состав

Кислые смолы и оксиды металлов. Побочное действие Не известно.

Предупреждение

Избегать попадания смешанного цемента на кожу или слизистую оболочку. В случае такого контакта убрать материала смоченным в спирте ватным тампоном и промыть обильным количеством воды. При попадании на глаза промыть обильным количеством воды открытые веки и обратиться к врачам.

Примечания

Хранить в местах, недоступных для детей. Только для использования в работе стоматолога.

Способ применения (подготовка картриджа)

При первом применении ввести картридж P-Cem automix в прилагаемый пистолет. Снять заглушку картриджа и легким нажатием добиться однородного выхода обеих паст. Уберите вытекшую пасту и установите канюлю. Перед применением для фиксации временных коронок или для временного пломбирования полостей выдавить небольшое количество (величиной с лесной орех) и убрать его. После этого продолжайте выдавливать и применять пасту (сейчас гарантировано однородное смешивание). Смену использованной канюли производить непосредственно перед следующим применением;

тем самым можно избежать

затвердевания материала в картридже.

Время обработки: прибл. 1:30 мин.
Время затвердевания во рту: 2-3 мин.

Особенности применения

Влажность (смоченные водой тампоны) делает удаление более легким. Остатки P-Cem automix в коронках можно легко удалить, намочив их холодной водой. Хранить P-Cem automix при нормальной комнатной температуре.

Условия хранения

Хранить P-Cem automix при нормальной комнатной температуре, не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности. Обратит внимание на надписи с условиями хранения и сроками годности. Хранить картриджи до следующего применения с использованными канюлями. CE0482

Форма выпуска

REF|WP4015 1 x 25 мл – картриджи + канюлей-смесителей.
REF|WP4016 2 x 25 мл – картриджи + канюлей-смесителей.

PL

P-CEM Automix®

Instrukcja użycia

P-Cem Automix to cement tymczasowy bez eugenolu, który nie zaburza reakcji wiązania materiałów wypełniających i mocujących na bazie tworzyw szklanych. P-Cem Automix jest wskazany w przypadku alergii na eugenol.

Obszary zastosowania

P-Cem Automix jest stosowany jako cement tymczasowy do koron i mostów oraz osadzania uzupełnień.

Istotne składniki

Kwasy żywiczne i tlenki metali.

Wzajemne oddziaływanie

Nie jest znane.

Ostrzeżenia

Unikać kontaktu zmieszanego cementu ze skórą lub błoną śluzową. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy usunąć materiał za pomocą wacików nasączonych alkoholem i spłukać dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je dużą ilością wody przy otwartych powiekach i skonsultować się z okulistą.

Uwaga

Trzymać z dala od dzieci. Przeznaczony wyłącznie do użytku przez stomatologa.

Sposób użycia

(przygotowanie wkładu)
Podczas pierwszego zastosowania włóż podwójny wkład P-Cem Automix do odpowiedniego urządzenia dozującego. Zdejmij nasadkę z podwójnego wkładu Automixa i wyciśnij trochę pasty, aż oba pasma wyjdą równomiernie. Wytrzyj wydostającą się pastę i załóż strzykawkę Automix. Przed aplikacją w tymczasową koronę lub ubytek wycisnąć i odrzucić ilość zbliżoną do wielkości orzecha laskowego. Następnie wycisnąć kolejny cement i nanieść (dopiero teraz gwarantowana jest jednorodna proporcja mieszanki P-Cem Automix).

Zużytą strzykawkę należy wymienić na nową dopiero przy następnej aplikacji, co zapobiegnie stwardnieniu cementu we wkładzie

Czas pracy: ok. 1,30 min.
Czas wiązania w jamie ustnej: 2-3 min.

Działania uboczne

W przypadku prawidłowego przygotowania i stosowania niniejszego wyrobu medycznego, niepożądane działania uboczne są niezwykle rzadkie. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepożądanych działań ubocznych – nawet w przypadku wątpliwości – prosimy o każdorazowe poinformowanie nas o nich, opisując jak najdokładniej towarzyszące im okoliczności i objawy.

Uwagi dotyczące przygotowywania

Należy zawsze przestrzegać instrukcji przygotowywania i środków ostrożności opisanych w instrukcji użytkowania dołączonej do produktu. W przypadku wystąpienia u pacjenta reakcji niepożądaną lub innych zdarzeń niepożądanych pomimo przestrzegania niniejszej instrukcji, prosimy o każdorazowe jej zgłoszenie z jak najbardziej szczegółowym opisem okoliczności towarzyszących.

Wskazówki dotyczące obsługi

Wilgoć (wilgotne sztyfty) ułatwia późniejsze usuwanie. Pozostałości P-Cem Automix można łatwo usunąć z koron, jeśli zostaną one na krótko schłodzone zimnym sprayem. P-Cem Automix należy przechowywać w normalnej temperaturze pokojowej.

Przechowywanie

P-Cem Automix należy przechowywać w temperaturze pokojowej, nie wyższej niż 25°C. Nie używać po upływie terminu ważności. Okres trwałości i data ważności: patrz etykieta. Wsad z użytą strzykawką przechowywać do następnego użycia.

Wielkość opakowania

REF|WP4015 wsad 1 x 25 ml + strzykawką do mieszania
REF|WP4016 wsad 2 x 25 ml + strzykawką do mieszania

TR

P-CEM Automix®

Kullanma Talimatı

P-Cem Automix, ejenol içermeyen, plastik esaslı dolgu ve yapıştırma malzemelerinin sertleşmesini engellemeyen geçici bir çimentodur. P-Cem Automix ejenol alerjileri için endikedir.

Uygulama alanları

P-Cem Automix kronlar, köprüler ve klosürler için geçici bir çimento olarak kullanılır.

Temel bileşenleri

Reçine asitleri ve metal oksitler.

Etkileşimleri

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

İkaz bilgileri

Kanştırılmış çimentonun deri veya mukozayla temas etmesinden kaçının. Bir temas halinde, materyali alkole batırılmış pamuklu çubuklarla temizleyin ve bol suyla durulayın. Gözle teması halinde, göz kapağını tamamen açarak bol suyla yıkayın ve bir göz doktoruna danışın.

Uyanlar

Çocuklardan uzak tutun. Sadece diş hekimi tarafından kullanılmak içindir.

Kullanılması

(Kartuşun hazırlanması)
İlk kez kullanırken, P-Cem Automix çift kartuşunu ilgili dağıtım cihazına takın. Automix çift kartuşunun kapağını çıkarın ve macunu her iki şerit de eşit şekilde çıkana kadar biraz sıkın. Çıkan macunu silin ve bir Atomix kanülü takın. Geçici kurona veya diş kavitesine uygulamadan önce, yaklaşık bir findik büyüklüğünde bir miktar sıkıp atın.

Ardından biraz daha çimento sıkıp uygulayın (P-Cem Automix'in homojen karışma oranı ancak şimdiki garantidir). Kullanılmış kanülü bir sonraki kullanınıza kadar yeni bir kanülle değiştirmeyin; bu sayede kartuştaki çimentonun sertleşmesi önlenir

İşlem süresi: yakl. 1:30 dakika

Ağızda sertleşme süresi: 2-3 dakika

Reçine asitleri ve metal oksitler.

Etkileşimleri

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

İkaz bilgileri

Kanştırılmış çimentonun deri veya mukozayla temas etmesinden kaçının. Bir temas halinde, materyali alkole batırılmış pamuklu çubuklarla temizleyin ve bol suyla durulayın. Gözle teması halinde, göz kapağını tamamen açarak bol suyla yıkayın ve bir göz doktoruna danışın.

Uyanlar

Çocuklardan uzak tutun. Sadece diş hekimi tarafından kullanılmak içindir. P-Cem Automix'i normal oda ısısında saklayın.

Saklama

P-Cem Automix 25°C sıcaklığı aşmayacak oda ısısında depolanmalıdır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Raf ömrü ve son kullanma tarihi için etikete bakınız. Kartuşu bir sonraki kullanıma kadar kullanılmış kanülle saklayın.

Ambalaj ebatları

REF|WP4015 1 x 25 ml kartuş + karıştırma kanülleri
REF|WP4016 2 x 25 ml kartuş + karıştırma kanülleri



Achtung
Warning

Gefahr
Danger

Achtung
Warning

H315

H318

H410

D

P-CEM Automix®

Gebrauchsinformation

P-Cem Automix ist ein eugenolfreier, provisorischer Zement, der die Aushärtung von Füllungs- und Befestigungs- materialien auf Kunststoffbasis nicht hemmt. Bei Allergien gegen Eugenol ist P-Cem Automix indiziert.

Anwendungsgebiete

P-Cem Automix wird als provisorischer Zement für Kronen und Brücken sowie für Verschluss verwendet.

Wesentliche Bestandteile

Harzsäuren und Metalloxide.

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Warnhinweise

Der Kontakt von angemischtem Zement mit Haut oder Schleimhaut ist zu vermeiden. Falls es doch zu einem Kontakt kommt, ist das Material mit alkoholgetränkten Wattebäuschchen zu entfernen und mit viel Wasser nachzuspülen. Bei Augenkontakt ist mit viel Wasser bei geöffnetem Lidspalt zu spülen und ein Augenarzt zu konsultieren.

Hinweise

Von Kindern fernhalten. Nur zur Anwendung durch den Zahnarzt bestimmt.

Anwendung

(Vorbereitung der Kartusche)

Bei der ersten Anwendung die P-Cem Automix-Doppelkartusche in das dazugehörige Austragegerät einsetzen.

Den Verschluss der Automix-Doppelkartusche entfernen und etwas Paste herausdrücken bis beide Stränge gleichmäßig austreten. Die ausgetretene Paste abstreifen und eine Automix-Kanüle aufsetzen. Vor der Applikation in die provisorische Krone oder in die Kavität eine etwa haselnussgroße Menge herausdrücken und verwerfen.

Danach weiteren Zement herausdrücken und applizieren, (erst jetzt ist ein homogenes Mischungsverhältnis von P-Cem Automix garantiert). Die gebrauchte Kanüle erst bei der nächsten Anwendung durch eine neue Kanüle ersetzen, hierdurch wird

ein Aushärten des Zementes in der Kartusche verhindert
Verarbeitungszeit: ca. 1.30 Min.
Erhärtungszeit im Mund: 2-3 Min.

Nebenwirkungen

Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen - auch in Zweifelsfällen - bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome.

Verarbeitungshinweise

Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsinformation beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände.

Tips zur Handhabung

Feuchtigkeit (feuchte Stümpfe) erleichtert später die Entfernbarkeit. Reste von P-Cem Automix lassen sich leicht aus Kronen entfernen, wenn sie kurz mit einem Kältespray abgekühlt werden.

P-Cem Automix bei normaler Zimmertemperatur lagern.

Lagerung

P-Cem Automix sollte bei Raumtemperatur und nicht über 25°C gelagert werden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Haltbarkeit und Verfalldatum siehe Etikett. Die Kartusche bis zum nächsten Gebrauch mit benutzter Kanüle lagern.

Packungsgröße

REFWP4015 1 x 25 ml-Kartusche + Mischkanülen
REFWP4016 2 x 25 ml-Kartusche + Mischkanülen

GB

P-CEM Automix®

Instructions for use

P-Cem is an eugenol-free temporary attachment cement, which contains calciumhydroxide and hydroxylapatit. P-Cem is used for fitting temporary crowns, bridges and for temporary sealing purposes. P-Cem is supplied in an automix cartridge together with mixing cannulas which will guarantee a correct economical mixing ratio at all times. The P-Cem automix cartridge can be used with the majority of mixing guns on the dental market.

Method of use

- Place the automix cartridge in the mixing gun.
- Remove the closure from the cartridge and verify that the exit of the two materials is not obstructed.
- Press the trigger of the mixing gun and check that the two components are exiting the nozzle at the same rate.
- Attach the mixing cannula.
- Apply a small amount of P-Cem directly onto the temporary crown or bridge.
- After use leave the mixing cannula in place, it will protect the nozzle until the next application.

Working time: approx. 1:30 min.
Curing time in the mouth: 2–3 min.

Side effects

Undesirable side-effects are extremely rare if the product is prepared and used properly. Should you become aware of any undesirable side-effects, including in cases of doubt, please notify us, giving as precise a description of the attendant circumstances and symptoms as possible.

Working instructions

Ensure that the working instructions and precautionary measures described in the supplied product information are always strictly observed. Should the patient suffer undesirable reactions or any other unwanted incidents arise even though these instructions were observed, then please inform us and give a precise description of the accompanying circumstances.

Supplementary instructions

Do not use P-Cem on dry cores, moisten them with some water beforehand. Residues of P-Cem can be removed easily after spraying them shortly with a cooling spray.

Storage

P-Cem Automix should be stored at room temperature and not above 25 °C. Do not use after the expiry date. See label for shelf life and expiry date. Store the cartridge with used syringe until the next use.

Presentation

REFWP4015 1 cartridge P-Cem, 25 ml + mixing cannulas
REFWP4016 2 cartridge P-Cem, 25 ml + mixing cannulas

P-Cem est un ciment de scellement temporaire sans eugénol, avec de l'hydroxide de calcium. P-Cem est conseillé pour le scellement des couronnes, bridges et obturations provisoires. L'absence d'eugénol permet la compatibilité avec les matériaux d'obturation et de scellement à base de résine. P-Cem contient de l'hydroxide de calcium et de l'hydroiapatite. P-Cem est livré en système auto-mélangeur. Les embouts sont parfaitement adaptés pour un mélange économique. P-Cem est utilisable avec la majorité des pistoles mélangeurs actuellement sur le marché dentaire.

Mode d'emploi

- Placer la cartouche sur le pistolet mélangeur.
- Enlever le bouchon de la cartouche et vérifier la bonne sortie des deux matériaux.
- Essayer la cartouche en évitant de mélanger les deux composants.
- Fixer l'embout mélangeur.
- Injecter le ciment provisoire directement dans les couronnes bridges ou obturations provisoires.
- Laisser l'embout mélangeur en place sur la cartouche, en guise de bouchon, jusqu'à l'utilisation suivante.

Temps de traitement : env. 1:30 mn.
Temps de durcissement dans la bouche : 2-3 min.

Effets secondaires

Lorsqu'il est correctement préparé et appliqué dans les conditions spécifiées, ce produit médical ne présente que très, très rarement des effets secondaires indésirables - même en cas de doute - nous vous serions reconnaissants de nous faire part du cas d'espèce constaté en nous donnant une description exacte des circonstances concomitantes et des symptômes.

F

P-CEM Automix®

Notice d'utilisation

Conseils de préparation

Il convient de respecter dans chaque cas les conseils de préparation ainsi que les précautions mentionnés dans la notice d'information concernant ce produit. Si, malgré le respect de ces conseils, vous deviez constater une réaction indésirable chez le patient ou bien d'autres incidents, nous vous prions de nous en faire part et de nous donner à ce sujet toutes les précisions voulues concernant les circonstances ayant accompagné le phénomène.

Quelques conseils d'utilisations

Utiliser P-Cem sur les moignons humides, les provisoire s'enlèvent plus facilement. Pour ré-utiliser un même provisoire déjà scellé avec P-Cem, enlever les résidus de P-Cem avec un spray à froid.

Rangement

P-Cem Automix doit être rangé à température ambiante et pas au-dessus de 25 °C. Ne l'utilisez pas s'il est périmé. Durabilité et date d'expiration: voir étiquette. Rangez la cartouche avec la canule utilisée jusqu'à la prochaine utilisation.

Presentation

REFWP4015 1 cartouche P-Cem, 25 ml + embouts mélangeurs économiques
REFWP4016 2 cartouche P-Cem, 25 ml + embouts mélangeurs économiques

E

P-CEM Automix®

Instrucciones de uso

P-Cem Automix, es un cemento provisorio libre de eugenol; para obturaciones y fijaciones no influye en el endurecimiento de materiales a base de resina. En caso de alergias al eugenol P-Cem esta indicado.

Uso

P-Cem es un cemento provisional para la fijación de coronas y puentes.

Componentes importantes

Resinas y óxidos de metales.

Atenciones

Evitar el contacto del cemento mezclado con la piel y la mucosa. Si hay contacto, eliminar con un copito de algodón impregnado con alcohol y luego con mucha agua. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con mucha agua y consultar con un médico.

Advertencia

Mantener el material fuera del alcance de los niños; uso solamente en el consultorio.

Forma de uso

Para el primer uso poner el cartucho en la pistola; sacar la tapa del cartucho y presionar un poco el material hasta que salgan la base y el catalizador en la misma proporción. Poner la cánula de mezcla. Antes de la aplicación del material en la corona o cavidad sacar una cantidad pequena. Después puede realizar la aplicación del cemento (en este momento garantizamos una mezcla homogena de P-Cem Automix). La cánula usada se cambia antes del próximo uso, así se evita el endurecimiento del material en el cartucho.

Tiempo de procesamiento:

aprox. 1:30 min

Tiempo de curado en boca: 2–3 min

Efectos secundarios

Con una correcta elaboración y aplicación, es muy poco frecuente que se produzcan efectos secundarios no deseados. Si no obstante llegasen a su conocimiento efectos secundarios no deseados - incluso en casos dudosos-, rogamos en todo caso que nos los comuniquen, con una descripción lo más exacta

E

P-CEM Automix®

Instrucciones de uso

posible de las circunstancias y de los síntomas.

Indicaciones sobre la elaboración

Respetar en todos los casos las indicaciones sobre la elaboración y las medidas de precaución descritas en las instrucciones para el uso correspondientes al producto. Si a pesar del cumplimiento de estas indicaciones, se llegasen a producir reacciones indeseadas en el paciente u otros efectos no deseados, rogamos en todo caso que nos los comuniquen, con una descripción lo más exacta posible de las circunstancias.

Manejo

Humedad (en los munones) facilita la eliminación. Excesos de P-Cem Automix en una corona se eliminan más fácil después de usar un spray frío. Almanecer en temperatura ambiente.

Almacenamiento

P-Cem se almacena con temperatura ambiente, no más que 25°C. No usar después de la fecha de vencimiento. Mirar la fecha de conservación y vencimiento en la etiqueta.

Embalaje

REFWP4015 1 x 25 ml cartuchos, + cánulas de mezcla
REFWP4016 2 x 25 ml cartuchos, + cánulas de mezcla

I

P-CEM Automix®

Istruzioni per l'uso

P-Cem Automix è un cemento provvisorio privo di eugenolo che non inibisce l'indurimento dei materiali di otturazione e cementazione a base di resina. P-Cem Automix è indicato in caso di allergie note all'eugenolo.

Campi di applicazione

P-Cem Automix è utilizzato come cemento provvisorio per corone e ponti, nonché per la chiusura.

Componenti essenziali

Acidi resinici e ossidi metallici.

Interazioni

Nessuna interazione nota.

Avvertenze

Evitare il contatto del cemento miscelato con la cute o le mucose. In caso di contatto, rimuovere il materiale con batuffoli di cotone imbevuti di alcol e sciacquare con abbondante acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua tenendo le palpebre aperte e consultare un oculista.

Indicazioni

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Destinato esclusivamente all'uso da parte dei dentisti.

Modalità d'uso

(Preparazione della cartuccia) Per la prima applicazione, inserire la cartuccia doppia di P-Cem Automix nel dispositivo di dosaggio corrispondente.

Togliere il tappo della cartuccia doppia di Automix e spremere un po' di pasta fino a quando entrambi i filamenti non escono in modo uniforme.

Pulire la pasta fuoriuscita e attaccare una cannula Automix. Prima dell'applicazione, spremere ed eliminare una quantità pari approssimativamente alle dimensioni di una nocciola nella corona provvisoria o nella cavità. Quindi premere e applicare dell'altro cemento (solo ora è garantito un rapporto di miscelazione omogeneo di P-Cem Automix).

Sostituire la cannula usata con una nuova solo all'applicazione successiva. Questo impedirà al

cemento nella cartuccia di indurirsi prima del tempo dovuto

Tempo di lavorazione: circa 1,30 min.
Tempo di indurimento in bocca: 2-3 min.

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medico sono estremamente rari, se correttamente lavorato e utilizzato. Se dovessero venire a conoscenza di eventuali effetti collaterali indesiderati, anche in casi dubbi, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze e i sintomi che li accompagnano nel modo più preciso possibile.

Indicazioni di lavorazione

Osservare tassativamente in ogni caso le indicazioni di lavorazione e le misure precauzionali contenute nel foglio illustrativo. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.

Consigli per l'uso

L'umidità (monconi inumiditi) facilita la rimozione in seguito. I residui di P-Cem Automix possono essere facilmente rimossi dalle corone, se raffreddati brevemente con del ghiaccio spray. Conservare P-Cem Automix a una temperatura ambiente normale.

Conservazione


Conservare P-Cem Automix a temperatura ambiente e non a temperature superiori a 25 °C. Non usare oltre la data di scadenza. Per la durata di conservazione e la data di scadenza guardare l'etichetta. Conservare la cartuccia con la cannula utilizzata fino all'uso successivo.

Dimensioni della confezione

REFWP4015 1 x cartuccia da 25 ml + canule di miscelazione
REFWP4016 2 x cartuccia da 25 ml + canule di miscelazione



We know how

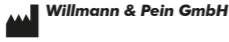

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: + (49) 4123/9228-0
Fax: + (49) 4123/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Achtung
Warning



Gefahr
Danger



Achtung
Warning



0482

Made in Germany

2020-REV-004